

**ZOLL AED 3™**

Guía de inicio rápido



**ZOLL®**

## Bienvenido

Gracias por seleccionar el ZOLL AED 3™ como su desfibrilador externo automático, el DEA más avanzado del mundo en la actualidad. Siga estas instrucciones simples para configurar su AED 3 en unos pocos minutos. Una vez que haya completado la configuración, consulte el número de serie e inicie sesión en [www.zollaed3.com](http://www.zollaed3.com) para registrar su AED 3 para obtener una garantía ampliada.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con ZOLL al +1-978-421-9655 o envíenos un correo electrónico a [tservice\\_master@zoll.com](mailto:tservice_master@zoll.com), o comuníquese con el distribuidor autorizado a quien le compró su AED 3.

# Contenido

## Carpeta de documentación:

- Guía de inicio rápido
- Certificado de activación PlusTrac™
- Cartel y guía de referencia para la reanimación ZOLL AED 3
- Manual del operador de ZOLL AED 3

## Incluidos en la caja:

- ZOLL AED 3
- Carpeta de documentación
- CPR Uni-padz™
- Batería para ZOLL AED 3


# Completar el registro del DEA

Inicie sesión en [www.zollaed3.com](http://www.zollaed3.com) donde podrá realizar lo siguiente:


- Registrar su garantía ampliada gratuita de 2 años;
- Configurar su cuenta de PlusTrac con el certificado de activación de PlusTrac,\* que le permite calificar para obtener PlusTrac sin ningún costo durante el primer año;
  - Realice un seguimiento de la disponibilidad de su AED 3
  - Realice un seguimiento de la capacitación de su personal de emergencia
  - Gestione su programa de DEA en línea
  - Obtenga recordatorios electrónicos y notificaciones de alerta
  - Permita que su AED 3 informe con regularidad los resultados de los autoanálisis a PlusTrac a través de su red de Wi-Fi local
- Reciba información acerca de cómo configurar su cuenta ZOLL en línea para la carga y gestión de datos de eventos clínicos en ZOLL Case Review™

\*El certificado de activación está incluido en la carpeta de documentación


# Configuración de su ZOLL AED 3

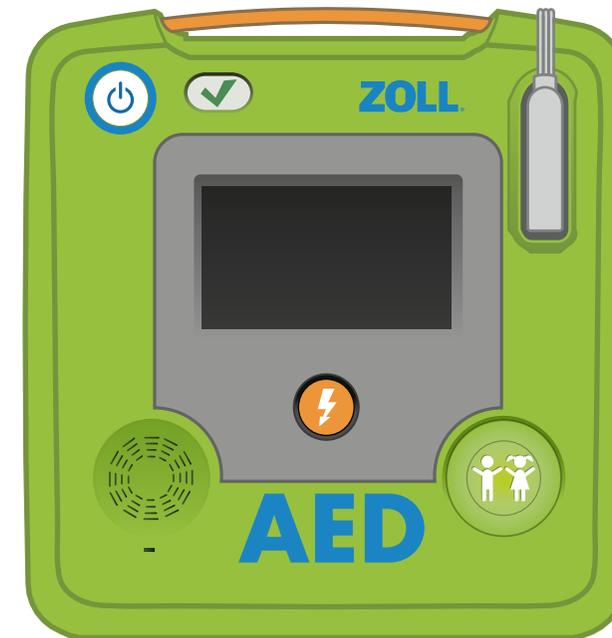


Retire todo el contenido del embalaje de envío.

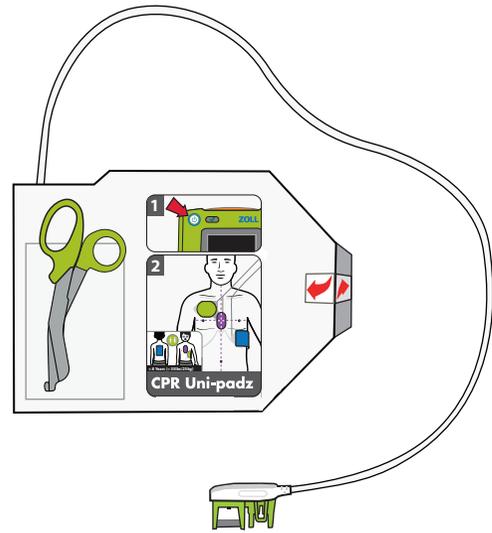


Retire el CPR Uni-padz de su caja protectora.

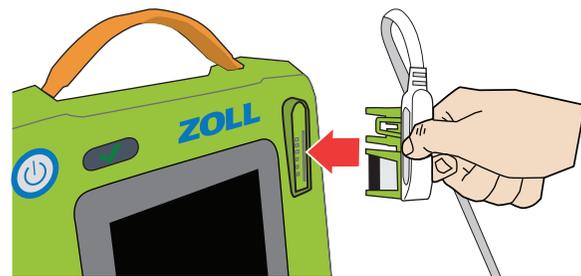


Conecte el cable del conector de CPR Uni-padz en el puerto del electrodo del AED 3.

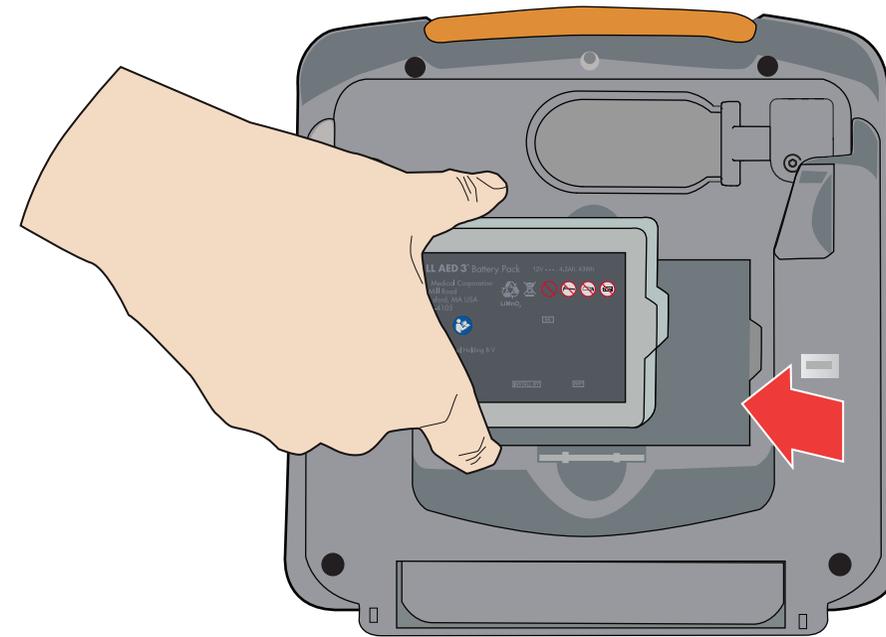

Retire la batería del AED 3 del embalaje de envío. Sostenga la batería por las lengüetas laterales, con la etiqueta hacia afuera. Coloque la batería en la parte posterior del DEA hasta que escuche un chasquido y la batería encaje en su lugar; alinee la muesca de la parte final de la batería con la forma correspondiente en el hueco de la batería.

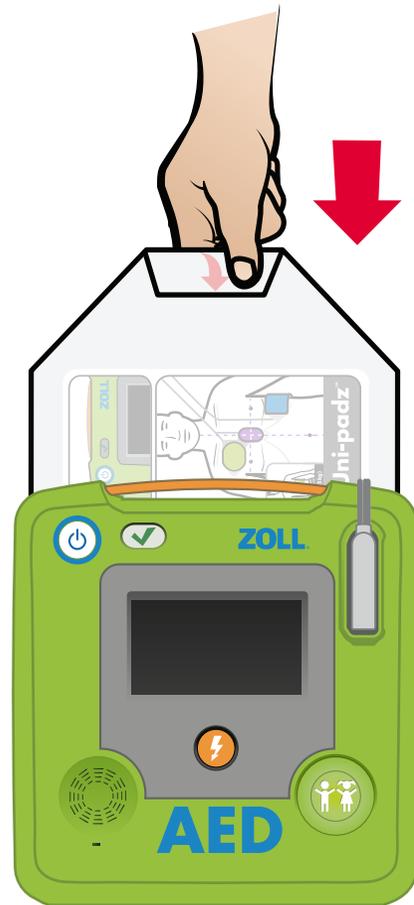

El ZOLL AED 3 realizará un autoanálisis automático. Mientras se está ejecutando el autoanálisis, inserte el CPR Uni-padz en la parte posterior del DEA de forma tal que la etiqueta del paquete apunte hacia usted.

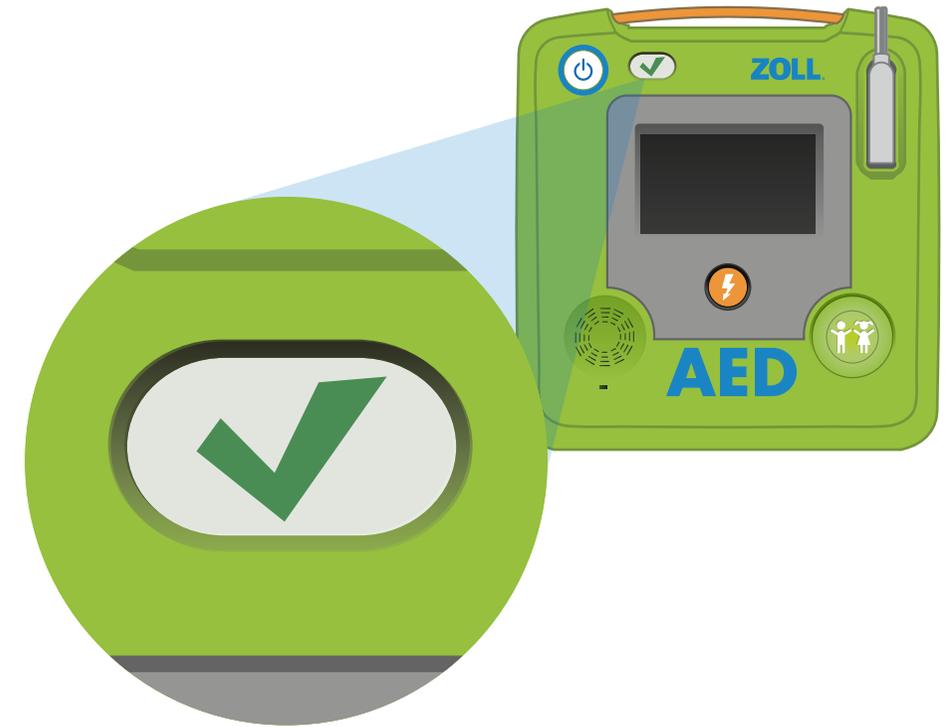

Después de completar el autoanálisis del AED 3, puede corroborar que el análisis haya sido exitoso si escucha la indicación de sonido "Unidad funcional" o si busca el símbolo de verificación verde en la ventana del indicador del estado. Su AED 3 ya está listo para su uso. Si tiene alguna pregunta, consulte el manual del usuario incluido en la carpeta de documentación.

**Preguntas:**

Comuníquese con el servicio técnico de ZOLL  
o con su representante local autorizado de ZOLL.

**Servicio técnico de ZOLL:**

Teléfono: +1-978-421-9655

Correo electrónico: [tservice\\_master@zoll.com](mailto:tservice_master@zoll.com)